

Mirru

1day Menicon Flat Pack



Lentes de contato diárias descartáveis
com tecnologia Smart Touch™




Miru

1day Menicon Flat Pack



A embalagem de lentes de contato mais fina do mundo...

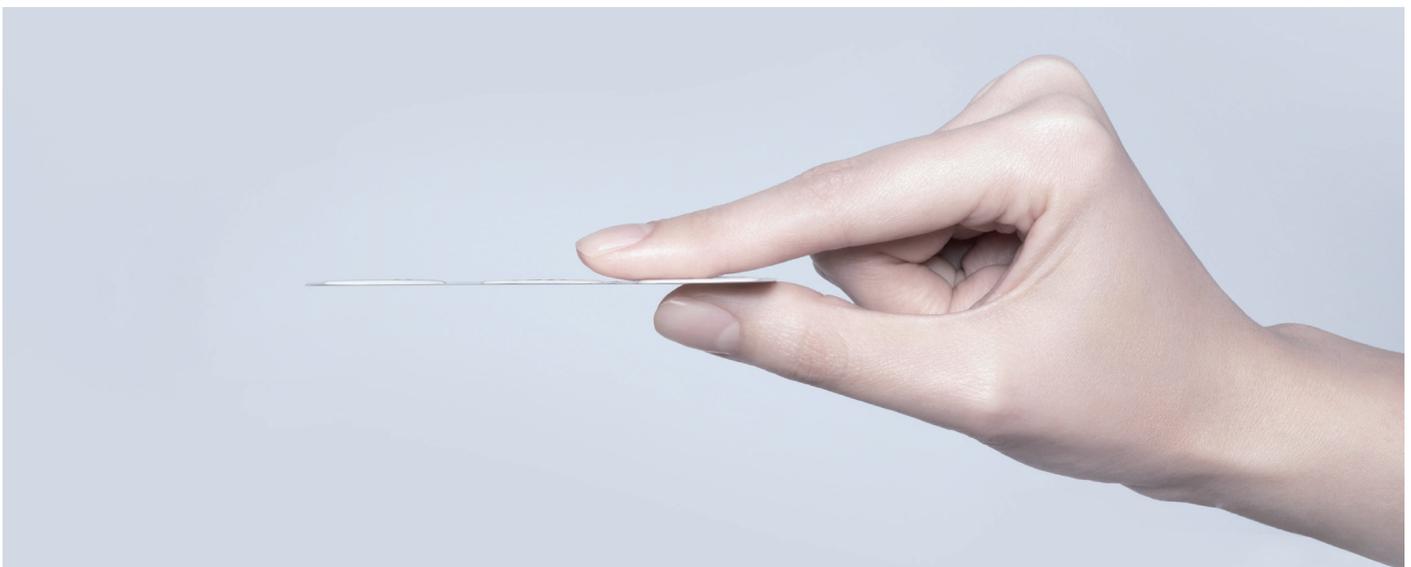

...desenhada pensando no usuário final, para facilitar a manipulação, higiene e uso mais confortável.

Nossa pesquisa demonstra que os principais problemas dos usuários de lentes de contato são:


- Dificuldade para abrir o blister
- Dificuldade para localizar as lentes no blister
- Dificuldade de identificar o lado interno e o externo da lente de contato.

Solucionamos estas questões com lentes Miru 1day:

- Facilidade para abrir o blister
- Facilidade para encontrar a lente
- Facilidade para colocar a lente na posição correta.


Lentes Miru 1day, favorecem o usuário:

- Fácil manuseio
- Melhor conformidade
- Melhor higiene das lentes

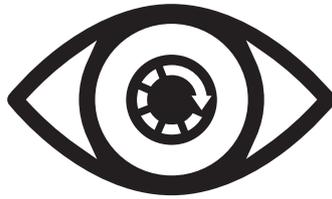

Conveniência

O que há de mais moderno em conveniência de lentes de contato

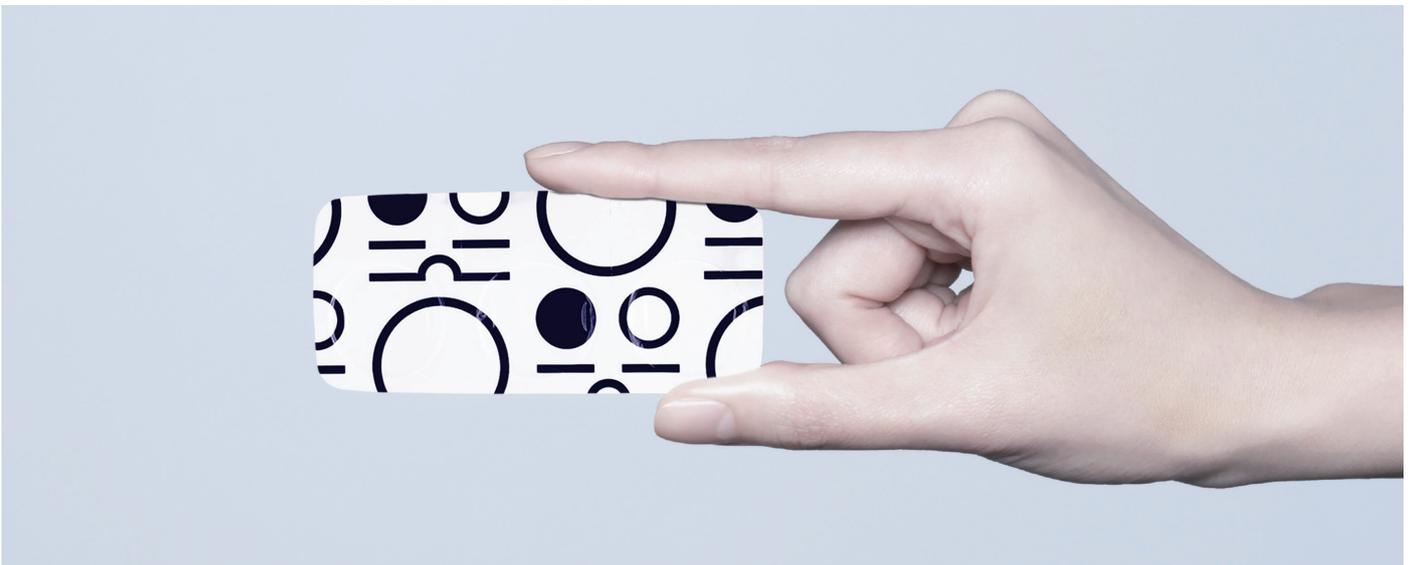

O blister de alumínio com apenas 1 mm de espessura, foi projetado para minimizar a manipulação e para que a lente possa ser usada com segurança e conforto.

Fácil de abrir

Blister de textura suave.

Fácil de encontrar


Não é necessário procurar a lente dentro da solução.

Fácil de usar

A face externa da lente fica posicionada para cima.

A embalagem ultrafina e leve foi projetada para facilitar o armazenamento, sendo útil para viagens e esportes. As lentes vem em uma embalagem prática de 30 unidades.



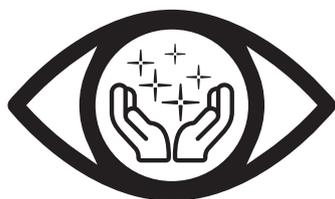

Higiene

Tecnologia Smart Touch™ para manuseio higiênico


A embalagem exclusiva, assegura que a parte interna da lente se mantenha sem se contaminar até a sua inserção. O usuário toca apenas a parte externa da lente.



Ao abrir o blister, a parte externa da lente está sempre posicionada para cima.



Eliminando a necessidade de tocar na superfície interna da lente.

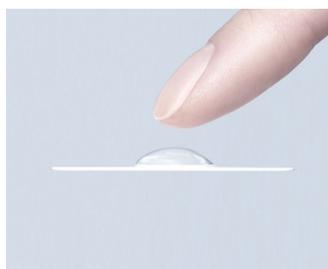


Reduzindo o risco de contaminar a parte interna da lente.



Manuseio mínimo para uma melhor higiene.

Redução do risco de contaminação microbiana

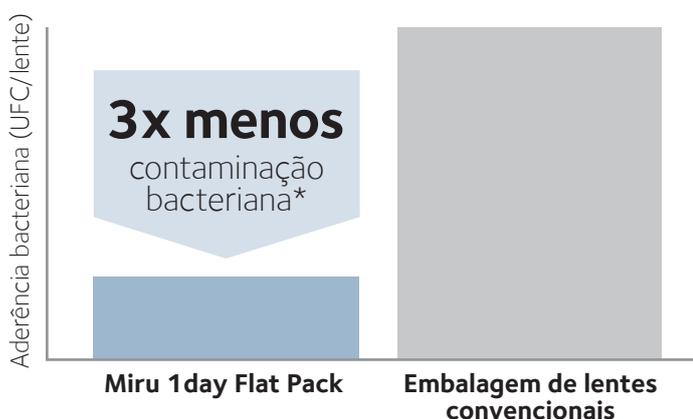


Nº de colônias de bactérias isoladas que as lentes trazem após a manipulação, para retirar do blister.

Active compliance™

- A embalagem foi desenhada especificamente para uso único.
- A forma da embalagem plana e não em forma de tigela, impede que seja reutilizada
- O volume da solução das lentes é de 0,2ml, otimizado para a conservação da lente. Isso impede sua reutilização.

SMART TOUCH™

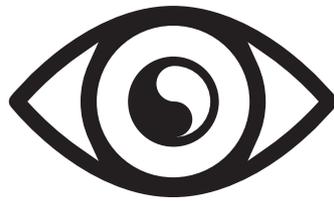


Conforto

Miru 1 day Flat Pack para um dia mais confortável

Desenvolvida para enfrentar os desafios da nossa vida atual.
Ar condicionado, dispositivos digitais, viagens e esportes.

Umectação natural


Este material biomimético se une de maneira natural à lágrima, utilizando um mecanismo similar à camada de mucina lacrimal, que retém a umidade e permite uma rápida reidratação da lente à cada piscar dos olhos.

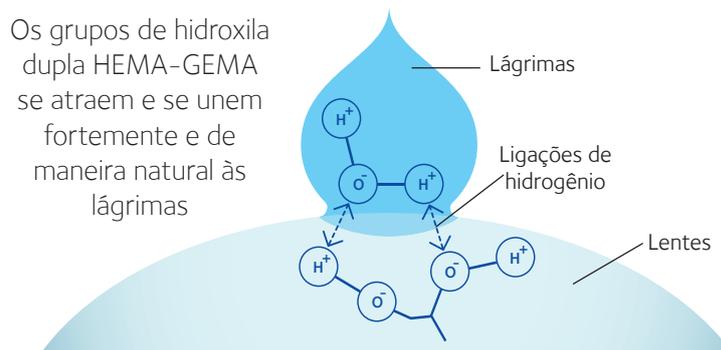


As lentes Miru 1 day ajudam a manter a integridade corneal ao longo do dia.

CENTRAFORM™ Edge Design - Uma borda desenhada para o conforto

O tipo de borda fina, faz com que a fricção com a conjuntiva e a pálpebra seja mínima,

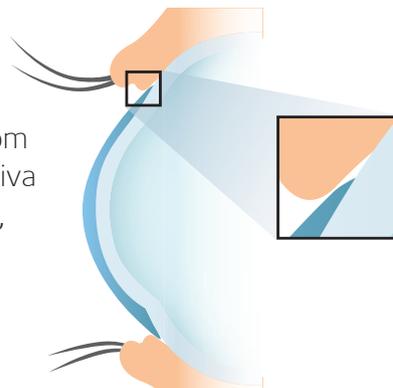


Este desenho de borda foi desenvolvido para oferecer excelente conforto, sendo suave e de baixa fricção.

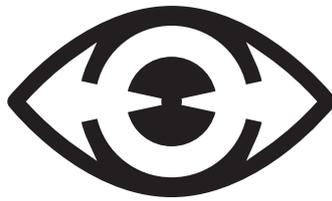

Visão

Design asférico para uma visão clara

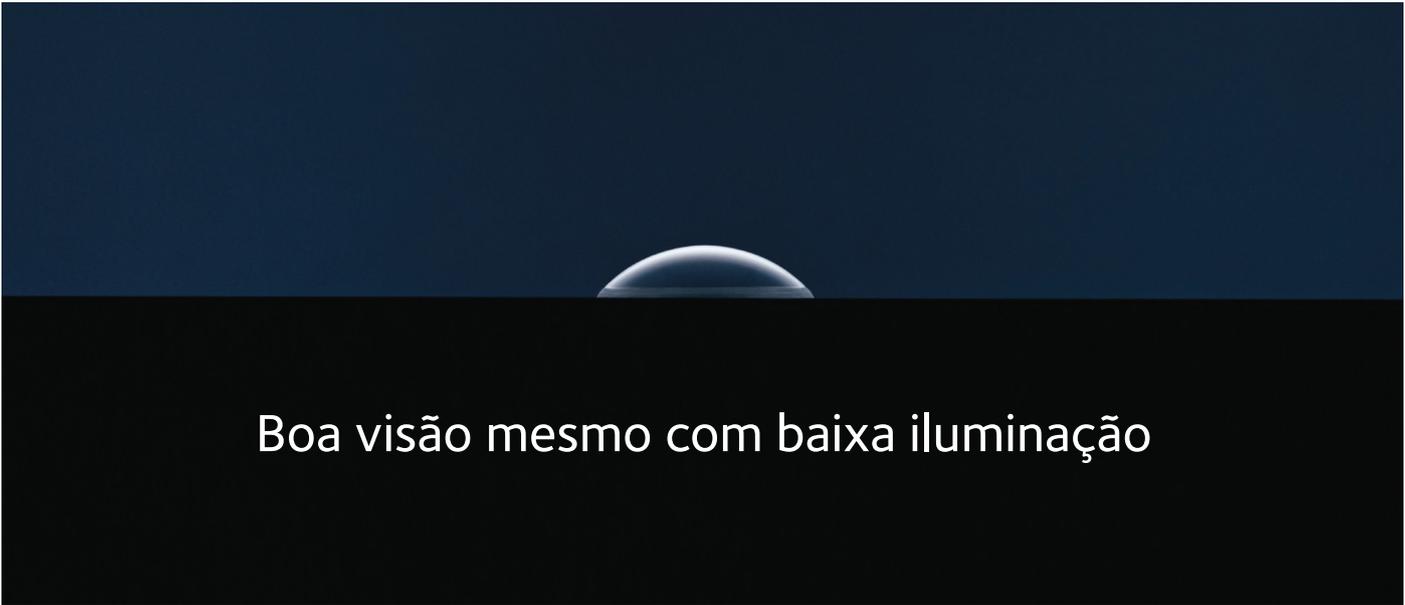


Boa visão mesmo com baixa iluminação


O processo CENTRAFORM™ torna possível a fabricação de lentes asféricas de altíssima qualidade.

Nas lentes asféricas, a aberração esférica pode causar embaçamento, por que o ponto focal dos raios que passam pela lente, varia de acordo com o centro da mesma.

Com o desenho asférico de Miru 1 Day, a aberração esférica é minimizada pois os raios focalizam corretamente para proporcionar boa acuidade visual, especialmente em condições de pouca luz.

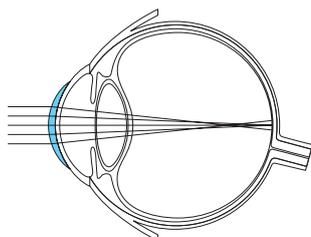

Desenho esférico

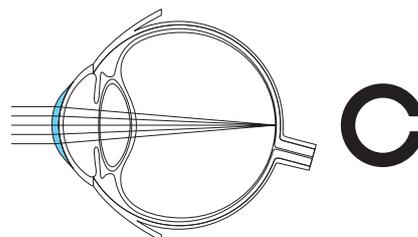

Design Asférico



Meio Ambiente

Cuidando do meio ambiente



8x mais fino

	Embalagem blister padrão	Miru 1day Flat Pack
Espessura	8mm	1mm
Volume	0.5 - 0.8ml	0.2ml

Miru 1day Flat Pack

Menos matéria-prima

A embalagem primária é fabricada com menos material.



Menos desperdício

As lentes utilizadas durante 1 ano (730 embalagens) geram apenas 20% de desperdício em comparação com as embalagens tradicionais.



Miru 1day Flat Pack

Convencional

Foco ambiental

O estojo é fabricado com moldes plásticos reciclados.

A nossa embalagem primária é reciclável.



Especificações do produto

Características	Material	Hioxifilcon A
	Conteúdo de água	57%
	Tinta de manipulação	Azul claro
	Desenho	Asférico
	Fabricação	Processo CENTRAFORM™
Parâmetros	Curva base	8.6mm
	Diâmetro	14.2mm
	Espessura do centro @-3.00D	0.1mm
	Faixa de potência	+0.50D a +4.00D (-0.25D intervalos) -0.50D a -6.00D (intervalos -0.25D) -6.50D a -10.00D (intervalos -0.50D)
Substituição	Modalidade	Uso diário
	Plano de substituição	Descarte diário
Embalagem		30 blisters de lente
		Blister de teste
		Estojo contendo 30 blisters de lentes



SMART TOUCH™

Menicon é importado e distribuído no Brasil por Alphacommerce.

Para mais informações e pedidos:

São Paulo

Al. Araguaia, 2.044, Torre 1 - Conjunto 611, Alphaville / Barueri - SP

Telefone: +55 11 2424-7365 Telefone: +55 11 2424-7366 Celular: +55 (11) 98340-3851