

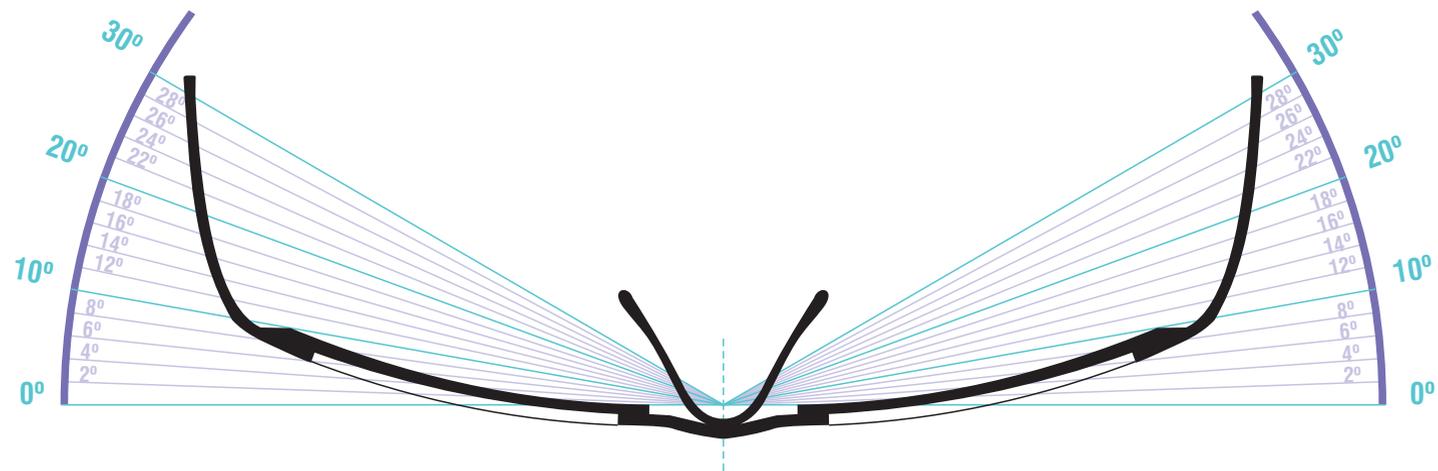


MARCAÇÕES PARA CURVATURA DA ARMAÇÃO

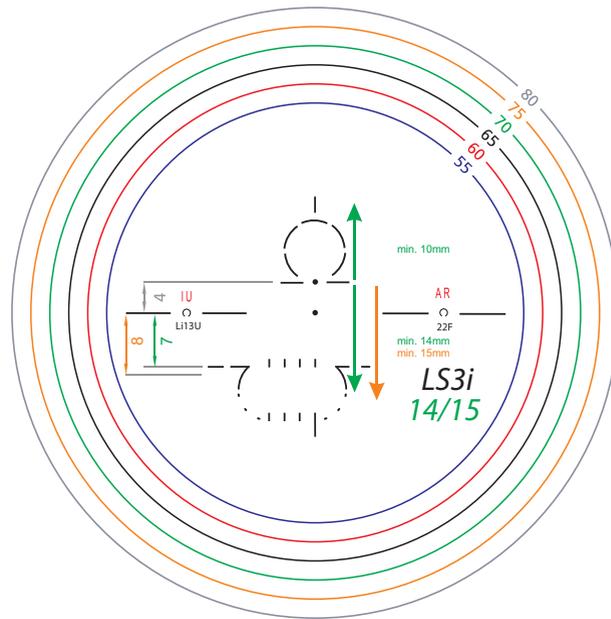

HOYALUX ID LIFESTYLE 3i

FÁCIL COMO 1, 2, 3

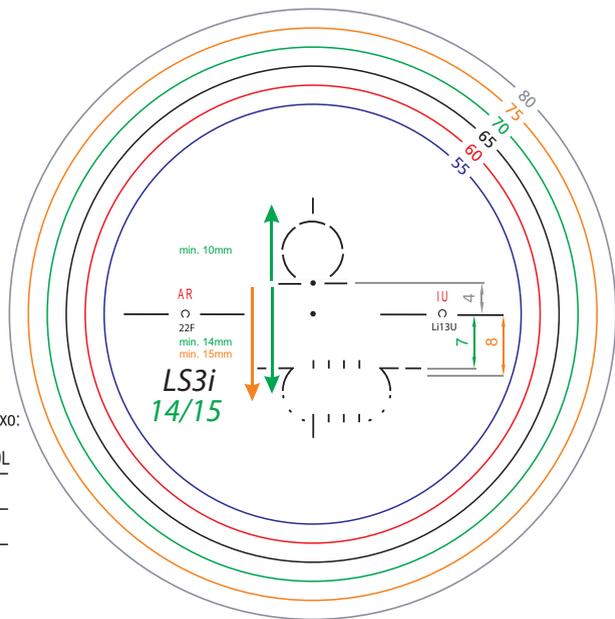

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

IU - Iniciais do Usuário

14 - 15 mm

LI = LifeStyle 3i

O = Outdoor

U = Urban



I = Indoor

	14mm	15mm
1.50	41	51
1.53	4X	5X
1.60	43	53
1.67	45	55
1.74	47	57

22F = Front Add. 2.25

HOYALUX ID LIFESTYLE 3i

FÁCIL COMO 1, 2, 3

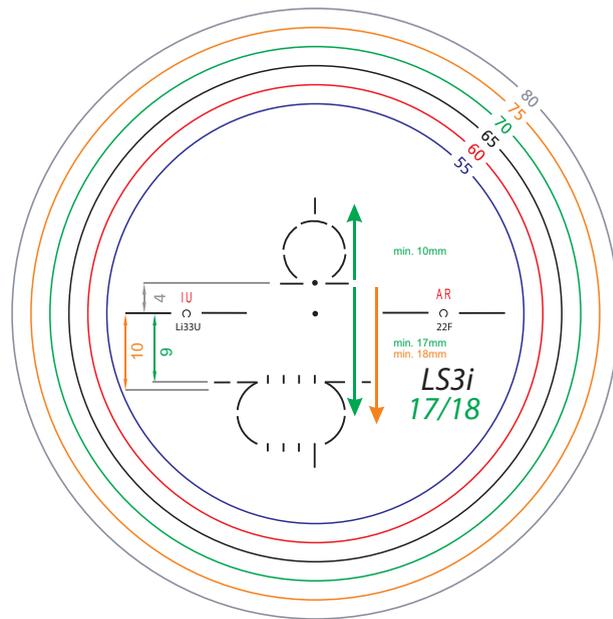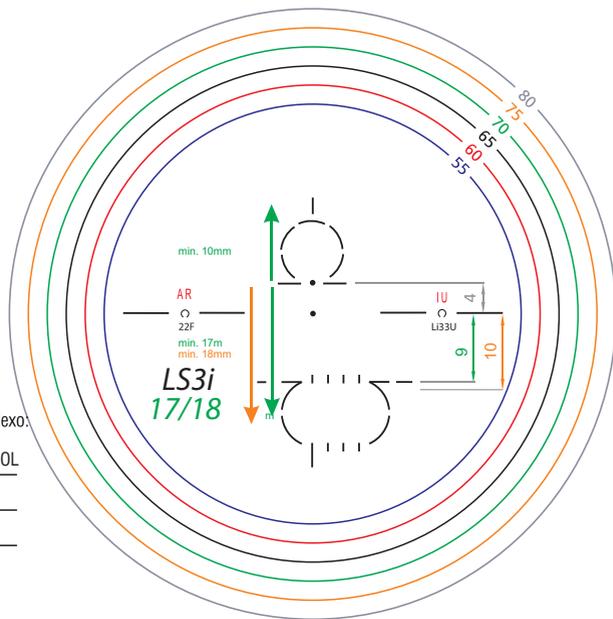

AR - Tratamentos Antirreflexo.

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

IU - Iniciais do Usuário

17 - 18 mm

LI = LifeStyle 3i

O = Outdoor

U = Urban

I = Indoor

	17mm	18mm
1.50	71	81
1.53	7X	8X
1.60	73	83
1.67	75	85
1.74	77	87

22F = Front Add. 2.25

HOYALUX ID LIFESTYLE V+

INSPIRADAS EM VOCÊ

Altura mínima de montagem 14mm




1.67	L45C / H
Trivex	L4XC / H
CR	L41C / H

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

IU - Iniciais do Usuário

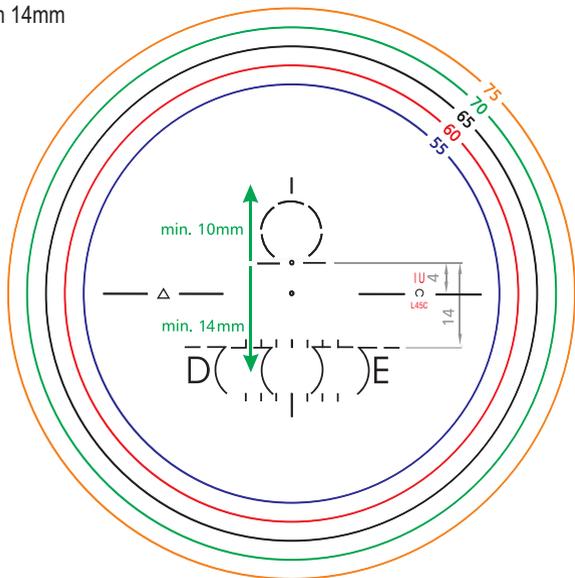

Altura mínima de montagem 18mm




1.67	L85C / H
Trivex	L8XC / H
CR	L81C / H

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

IU - Iniciais do Usuário

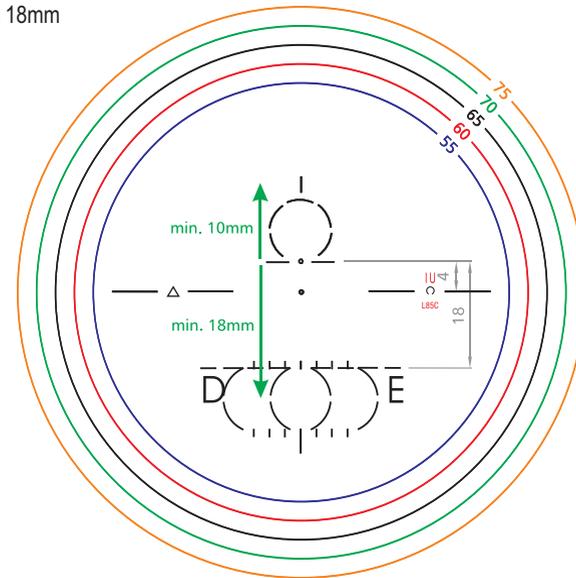

OBS.: As marcações das lentes irão variar entre C ou H de acordo com o tipo de desenho: Clarity = C / Harmony = H.

HOYALUX ID LIFESTYLE

A PROGRESSIVA SOB MEDIDA

Altura mínima de montagem 14mm




1.67	L45
Trivex	L4X
CR	L41

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

IU - Iniciais do Usuário

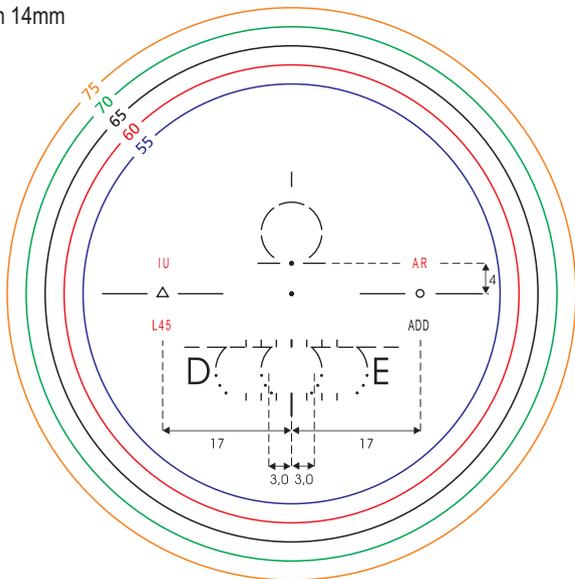

Altura mínima de montagem 18mm




1.67	L85
Trivex	L8X
CR	L81

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

IU - Iniciais do Usuário

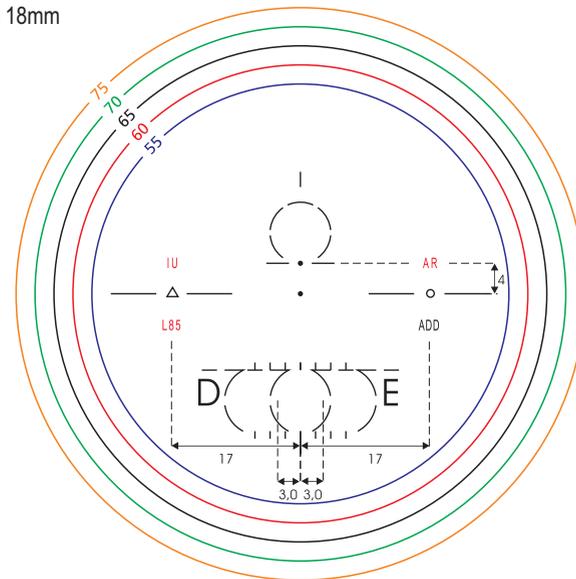

HOYALUX WIDE PREMIUM VXT

A LENTE PARA TODAS AS OCASIÕES



Altura de Montagem

4 = 14mm

6 = 16mm

8 = 18mm

2 = 20mm


Materials

VBP1= 1.50

VBPX = 1.53


VBPP = 1.59

VBP5 = 1.67

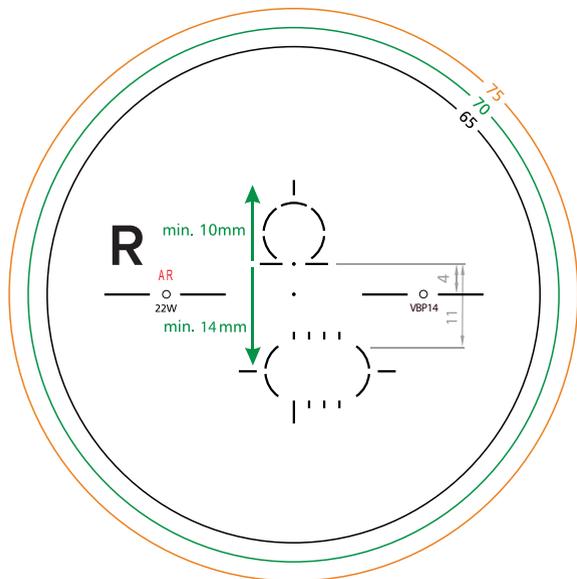

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

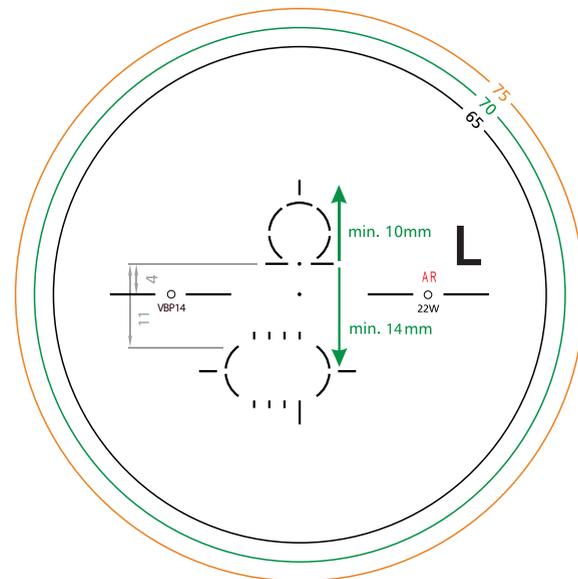

HOYALUX WIDE PREMIUM VXT

A LENTE PARA TODAS AS OCASIÕES



Altura de Montagem

4 = 14mm

6 = 16mm

8 = 18mm

2 = 20mm


Materiais

VBP1= 1.50

VBPX = 1.53


VBPP = 1.59

VBP5 = 1.67

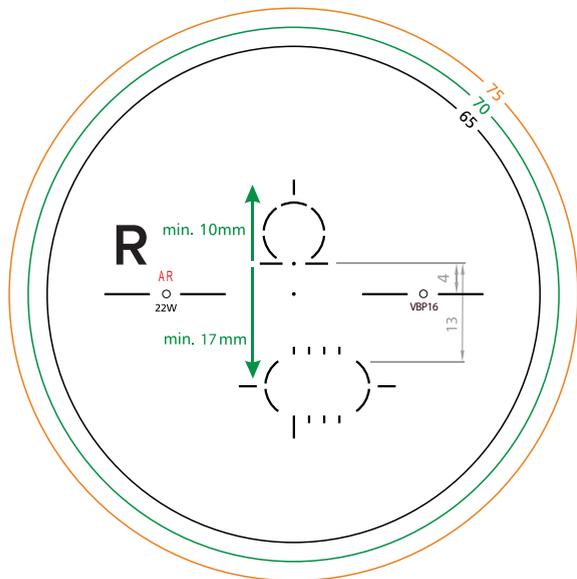

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

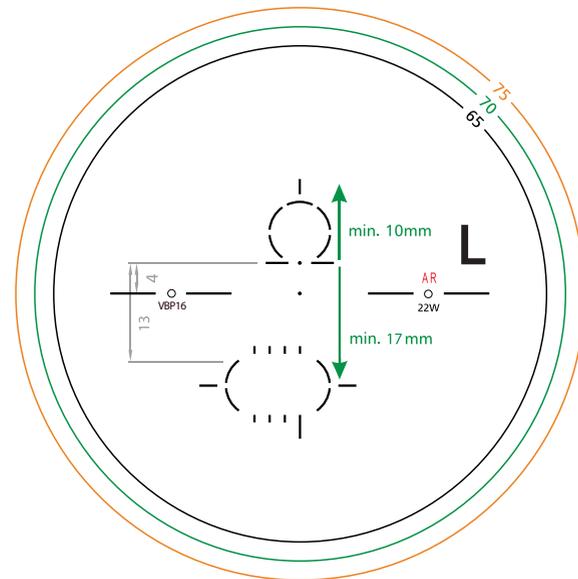

O antirreflexo NO-Risk pode ser aplicado apenas na face interna quando a lente for polarizada.

HOYALUX WIDE PREMIUM VXT

A LENTE PARA TODAS AS OCASIÕES



Altura de Montagem

4 = 14mm

6 = 16mm

8 = 18mm

2 = 20mm


Materiais

VBP1= 1.50

VBPX = 1.53


VBPP = 1.59

VBP5 = 1.67

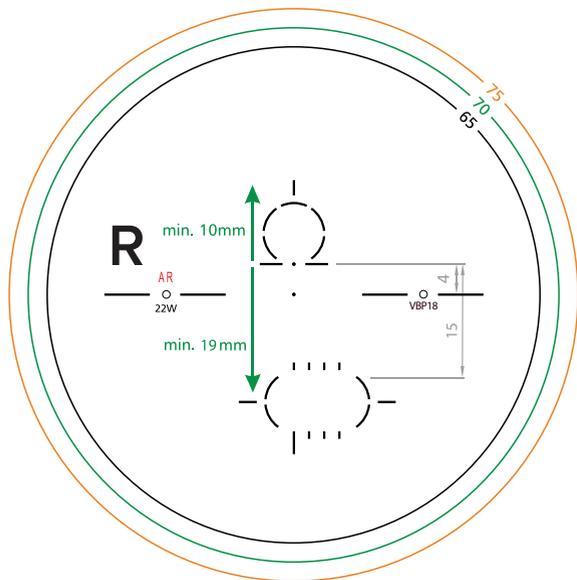

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

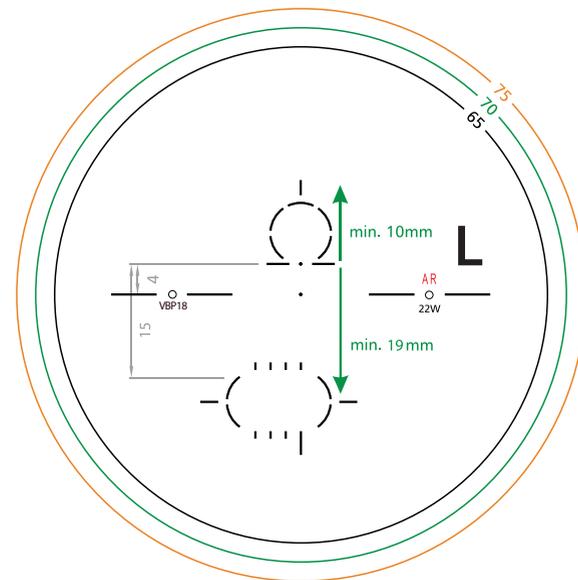

O antirreflexo NO-Risk pode ser aplicado apenas na face interna quando a lente for polarizada.

HOYALUX WIDE PREMIUM VXT

A LENTE PARA TODAS AS OCASIÕES



Altura de Montagem

4 = 14mm

6 = 16mm

8 = 18mm

2 = 20mm


Materiais

VBP1= 1.50

VBPX = 1.53


VBPP = 1.59

VBP5 = 1.67

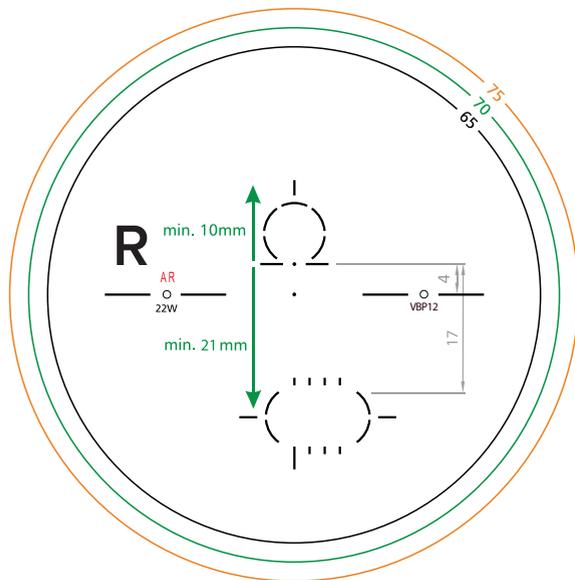

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

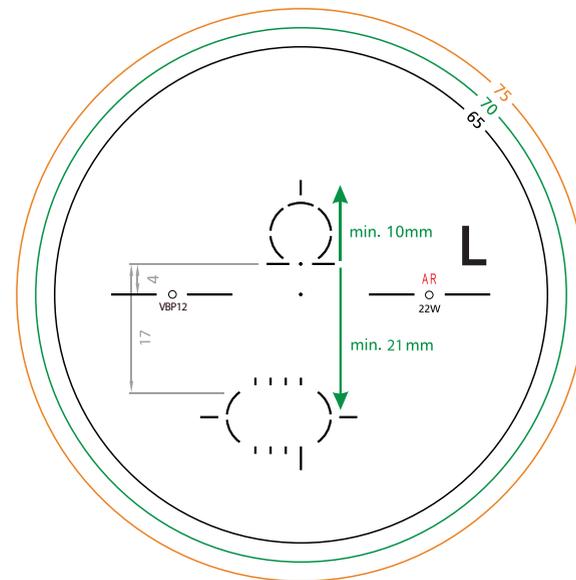

O antirreflexo NO-Risk pode ser aplicado apenas na face interna quando a lente for polarizada.

HOYALUX WIDE PRO VXT

HOYALUX
WIDE PRO

VXT

Altura de Montagem


8 = 18mm

Materials

VSP1= 1.50


VSPX = 1.53

VSP5 = 1.67

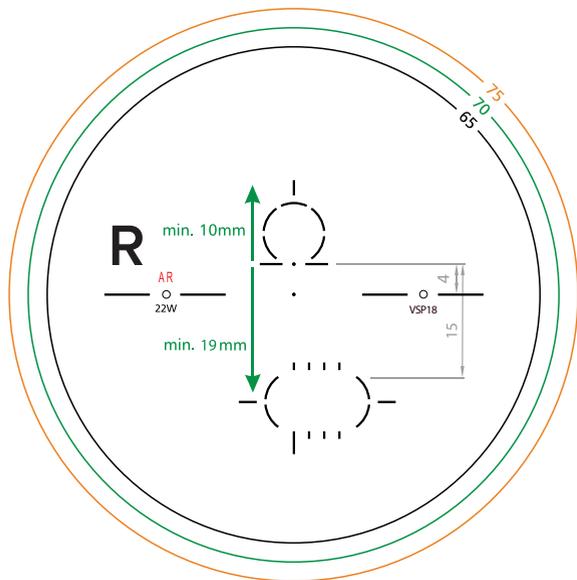

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

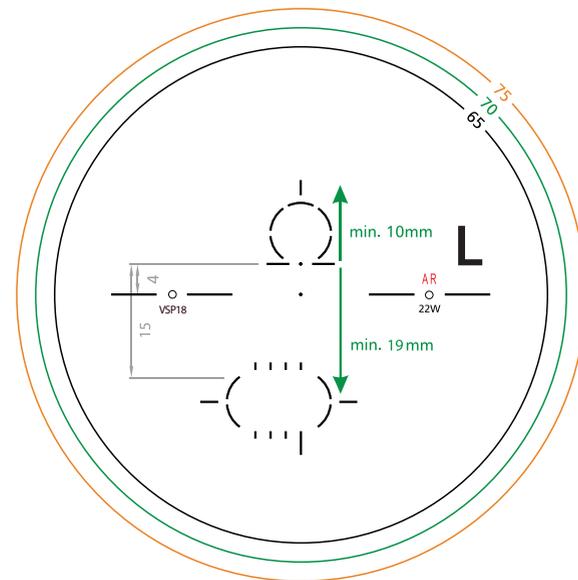

HOYALUX SUMMIT VXT



Altura de Montagem


4 = 14mm

Materials

VCD1= 1.50


VCDX = 1.53

VCD5 = 1.67

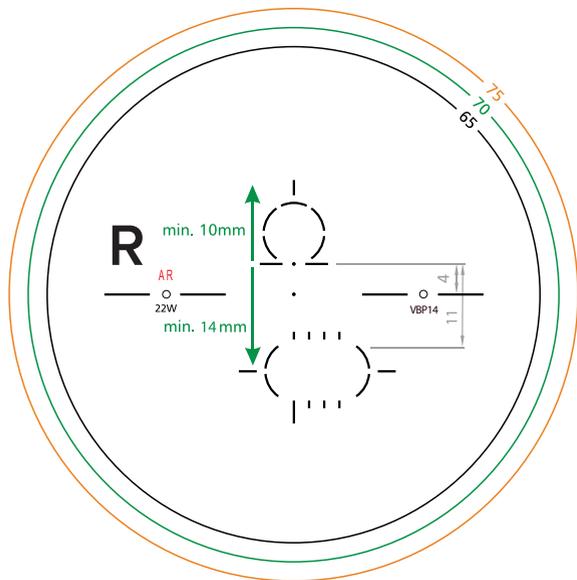

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

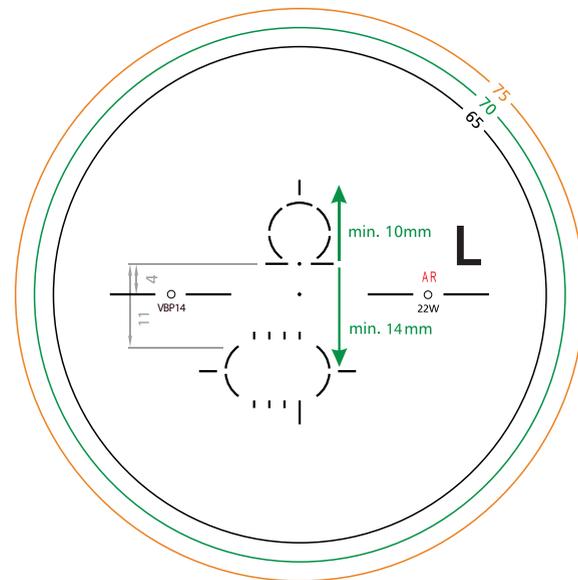

HOYALUX WIDE VXT

HOYALUX
WIDE

VXT

Altura de Montagem


8 = 18mm

Materials

VW1 = 1.50


VWX = 1.53

VW5 = 1.67

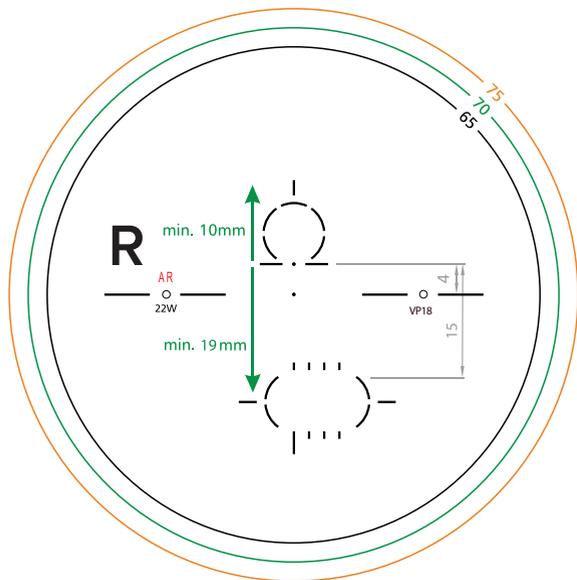

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

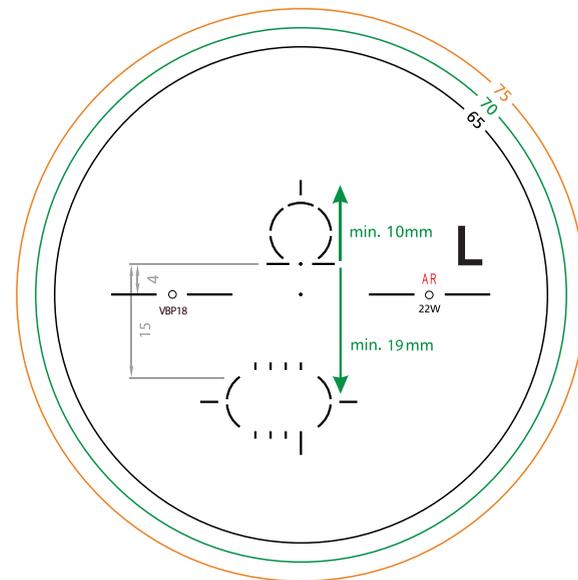

HOYALUX WIDE PRO BKS

HOYALUX
WIDE PRO

BKS

Altura de Montagem


8 = 18mm

Materials

FSP1= 1.50


FSPX = 1.53

FSP5 = 1.67

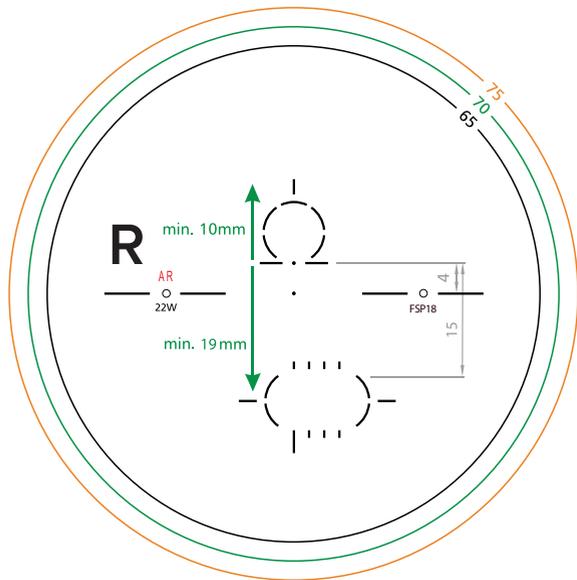

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

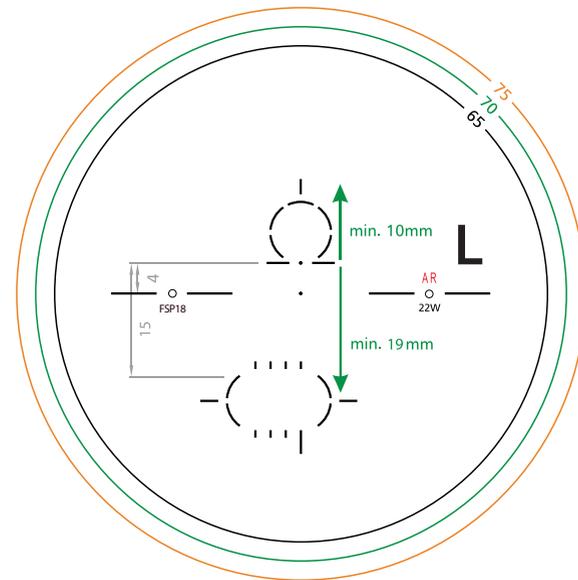

HOYALUX SUMMIT BKS



Altura de Montagem


4 = 14mm

Materials

FCD1= 1.50


FCDX = 1.53

FCD5 = 1.67

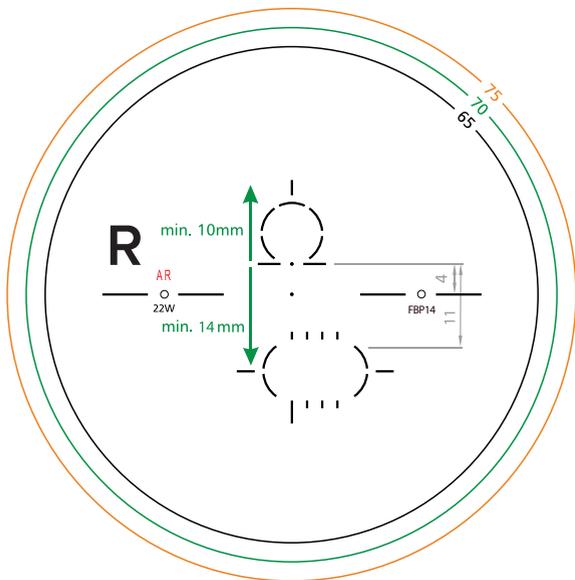

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

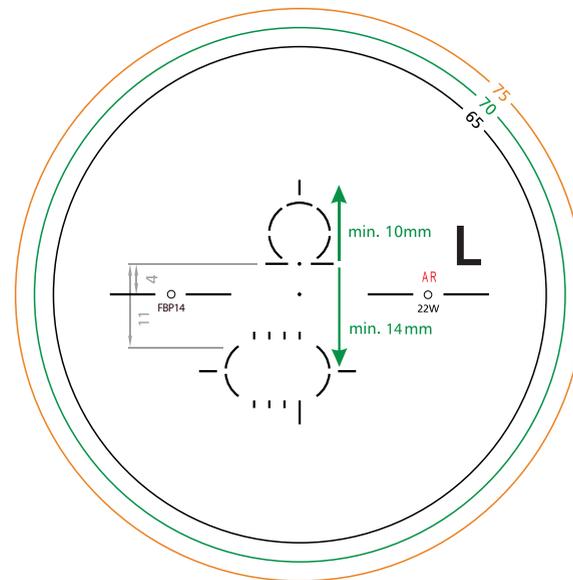

HOYALUX TRUEFORM

PRESBIOPIA+ASTIGMATISMO


Altura mínima de montagem 14mm



1.67	TF	CD5
Trivex	TF	CDX
CR	TF	CD1

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

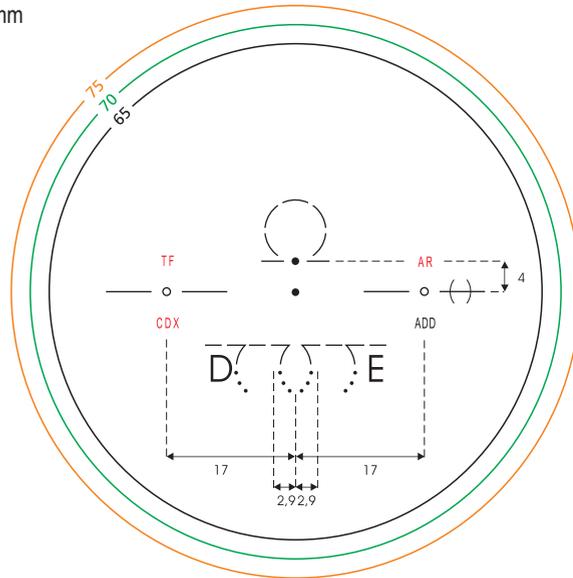


Altura mínima de montagem 18mm



		WIDE	WIDE PRO
Trivex	TF	WX	SPX
CR	TF	W1	Sp1

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

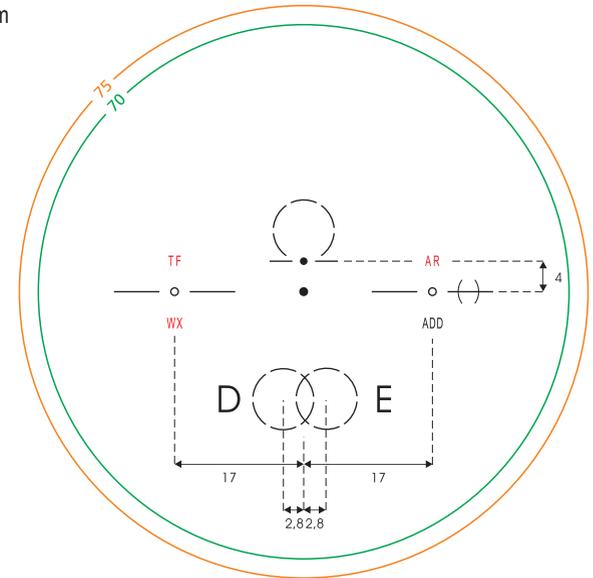


HOYALUX GP

Altura mínima de montagem 22mm



Altura mínima montagem	GP
	22mm
CR	G1

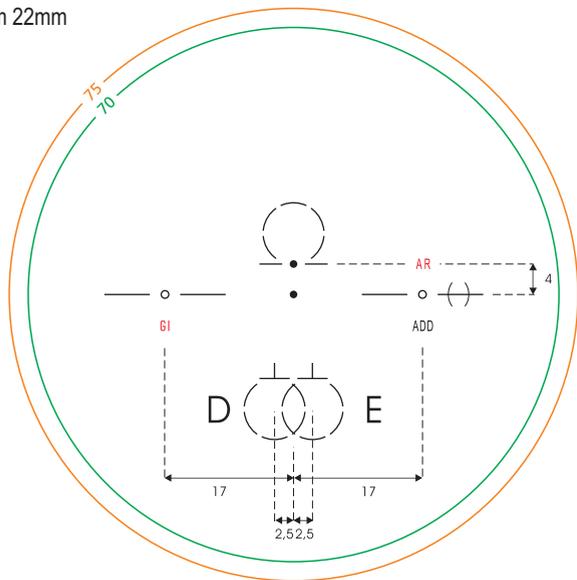

ARGOS TRUEFORM

ALTA TECNOLOGIA AO ALCANCE DE TODOS


Altura mínima de montagem 14mm



1.60	TF	AS3
Trivex	TF	ASX
CR	TF	AS1

AR - Tratamentos Antirreflexo:


No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

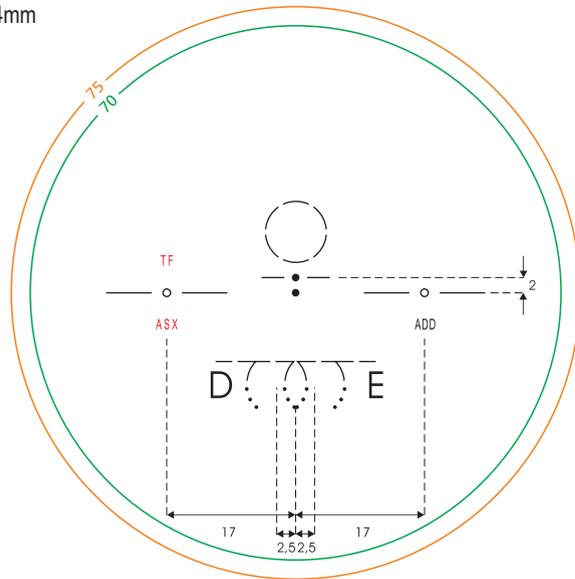

Altura mínima de montagem 18mm



1.60	TF	A3
Trivex	TF	AX
CR	TF	A1

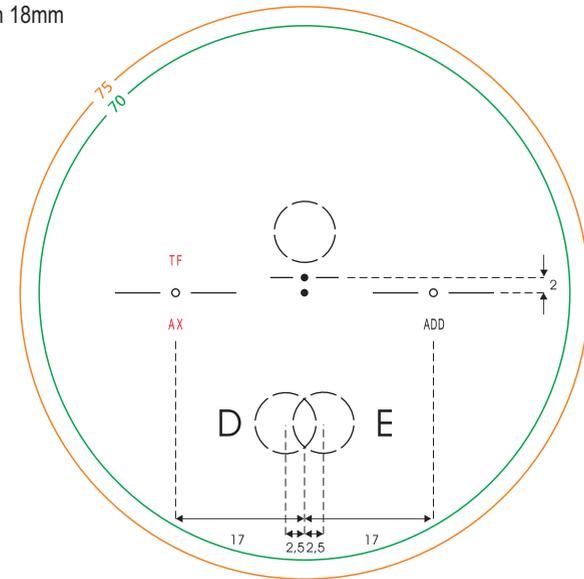

ARGOS


O DNA HOYA AO ALCANCE DE TODOS

Altura mínima de montagem 14mm

ARGOS	
PROGRESSIVE	
1.60	DAS3 ou A3 FFYAS3 ou F/YA3
TRIVEX	DASX ou AX FFYASX ou F/YAX
POLI	DASP ou AP FFYASP ou F/YAP
CR	DAS1 ou A1 FFYAS1 ou F/YA1


AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

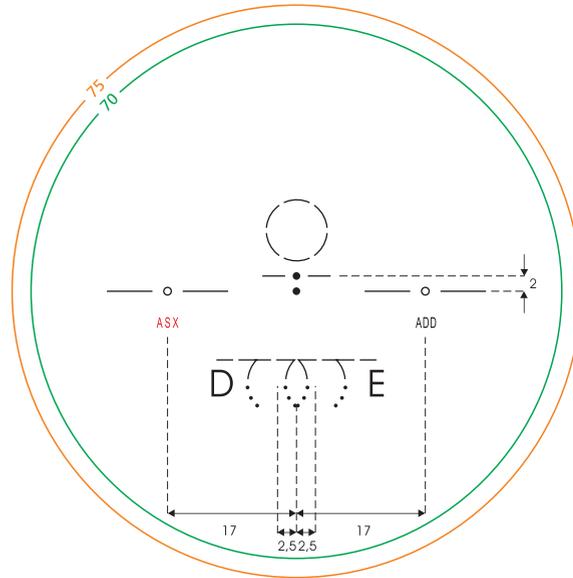

Altura mínima de montagem 18mm

ARGOS	
PROGRESSIVE	
1.60	DAS3 ou A3 FFYAS3 ou F/YA3
TRIVEX	DASX ou AX FFYASX ou F/YAX
POLI	DASP ou AP FFYASP ou F/YAP
CR	DAS1 ou A1 FFYAS1 ou F/YA1

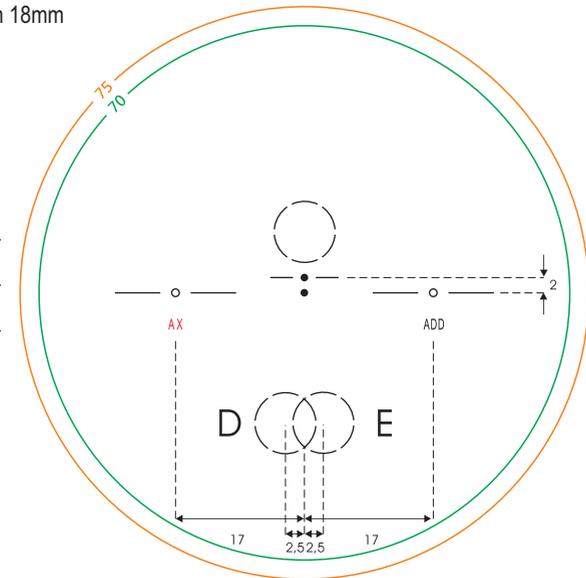

AMPLUS ASPHERIC

AMPLIE SUAS ESCOLHAS



Altura mínima de montagem 18mm



Poli	DJ / FFJ
CR	DJH / FFJH
TRIVEX	FFJX

AR - Tratamentos Antirreflexo:



No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

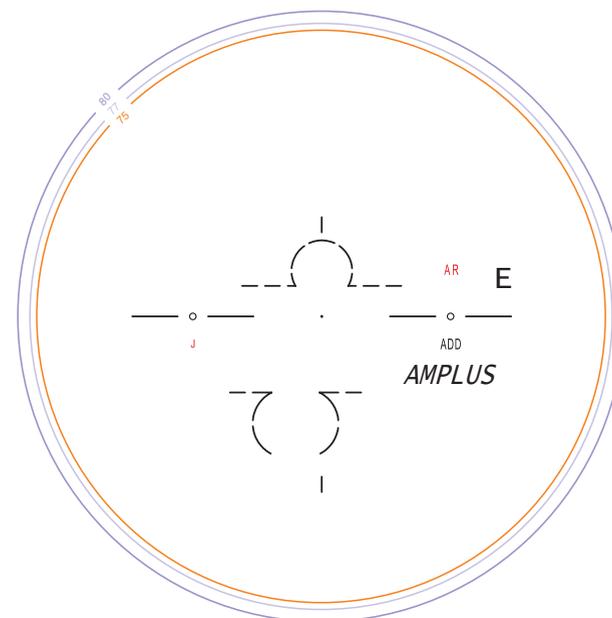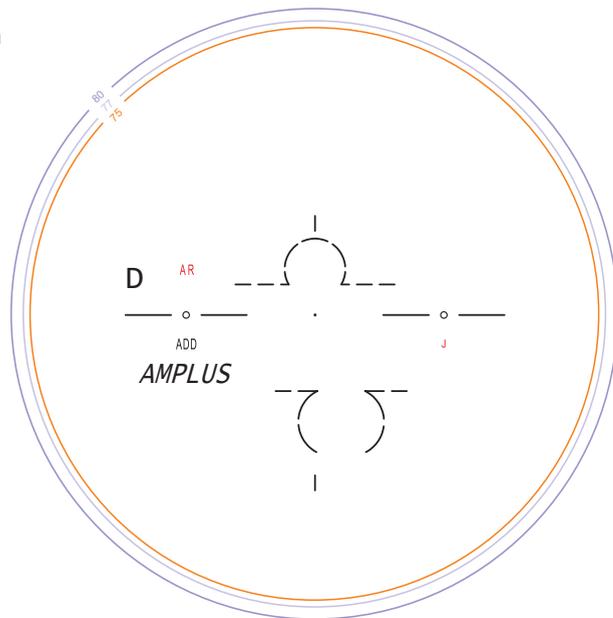

Obs.: O tratamento BLUECONTROL não é aplicado em lentes policarbonato. * Marcação AMPLUS / ELITE.

ENROUTE

Altura mínima de montagem 18mm

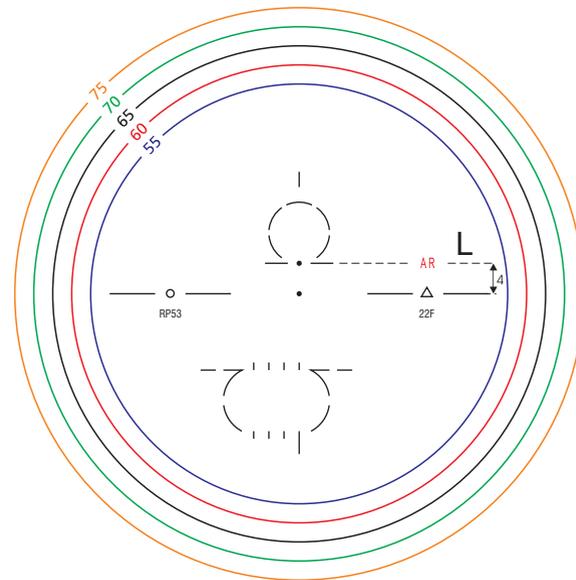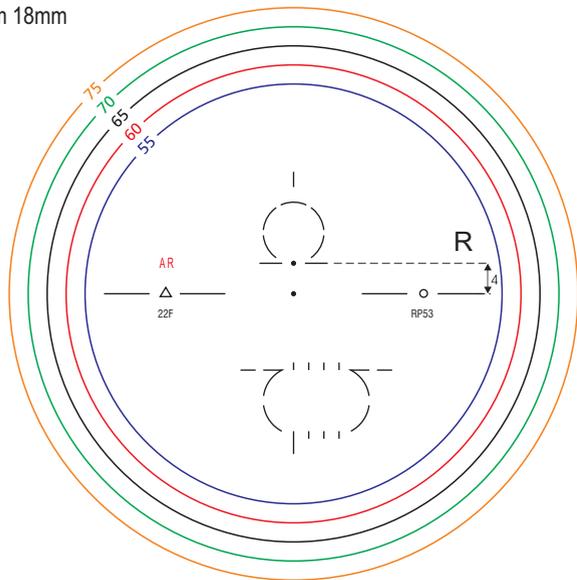

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

Enroute	
RP53V	1.60
RP55V	1.67

22F = Front Add. 2.25

SYNC III

Altura mínima de montagem 18mm

SYNC III


1.50	DS1
TRIVEX	DSX
1.67	DS5
1.74	DS7

SYNC 5	5
SYNC 9	9
SYNC 13	13

AR - Tratamentos Antirreflexo:

BLUECONTROL



BC

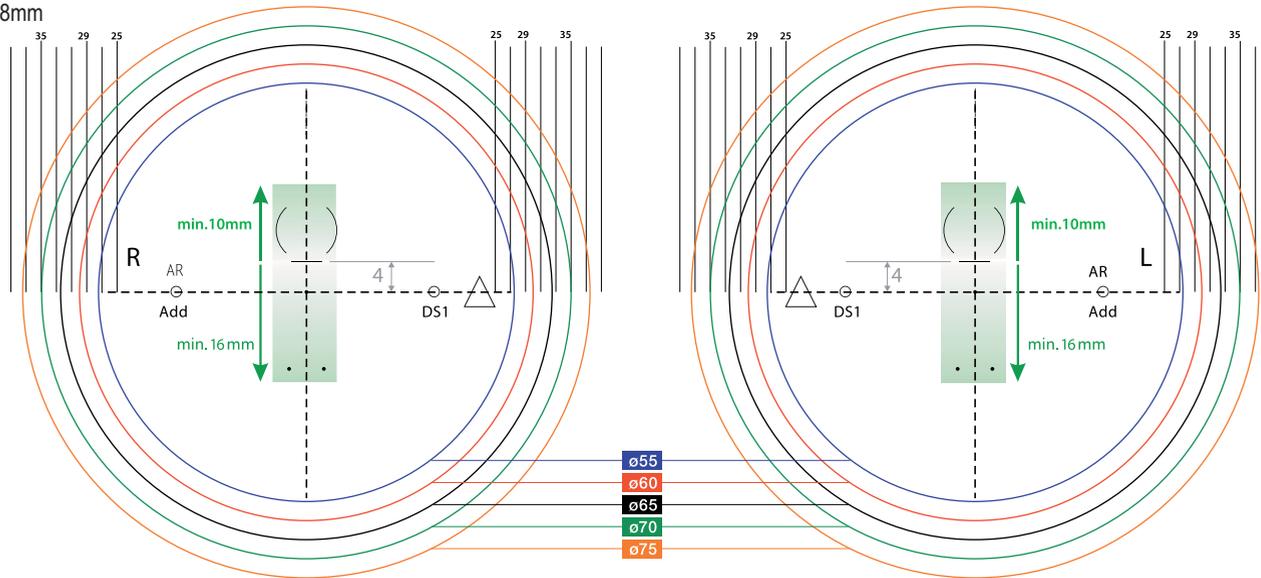

HOYALUX ID WORKSTYLE V+

PARA PROFISSIONAIS COMO VOCÊ

HOYALUX ID
WORKSTYLE
V+

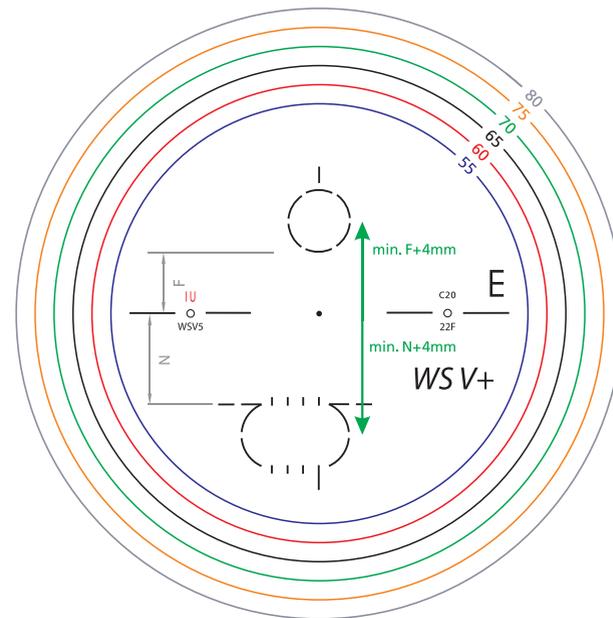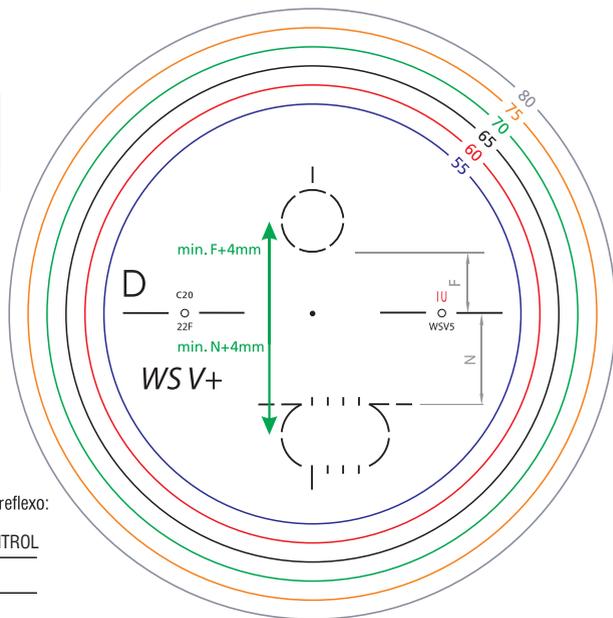

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

18 - 24 mm
N = Perto
F = Longe

C20 = DESENHO + corredor (mm)

C = CLOSE
S = SCREEN
P = SPACE

Corredor	F	N
18 mm	7	11
19 mm	8	11
20 mm	8	12
21 mm	9	12
22 mm	9	13
23 mm	10	13
24 mm	10	14

WSV1 = 1.50
WSVX = 1.53
WSV3 = 1.60
WSV5 = 1.67
WSV7 = 1.74

22F = Front Add. 2.25

HOYA DESKTOP PREMIUM



Altura mínima de montagem 18mm



TRIVEX	BDX
CR	BD1

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

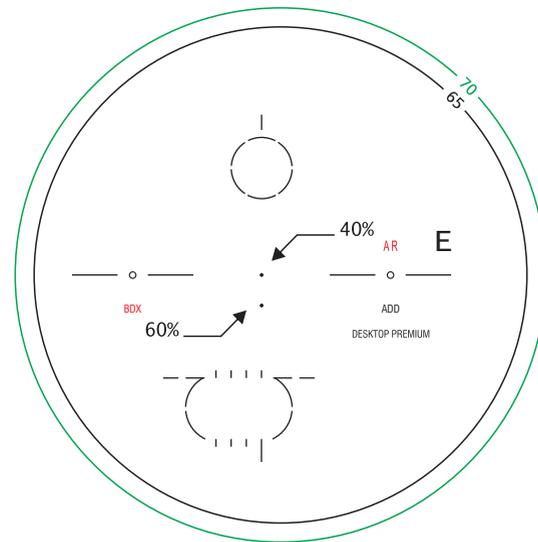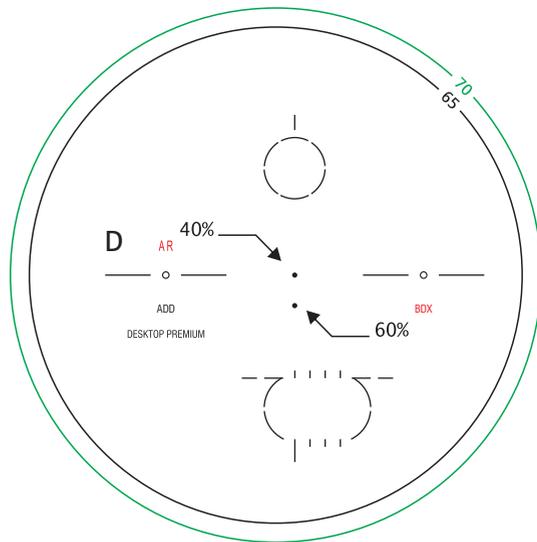

HOYA DESKTOP

A LENTE QUE TRABALHA POR VOCÊ



Altura mínima de montagem 18mm

DESKTOP

1.60 | **T3**
CR | **T1**


AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

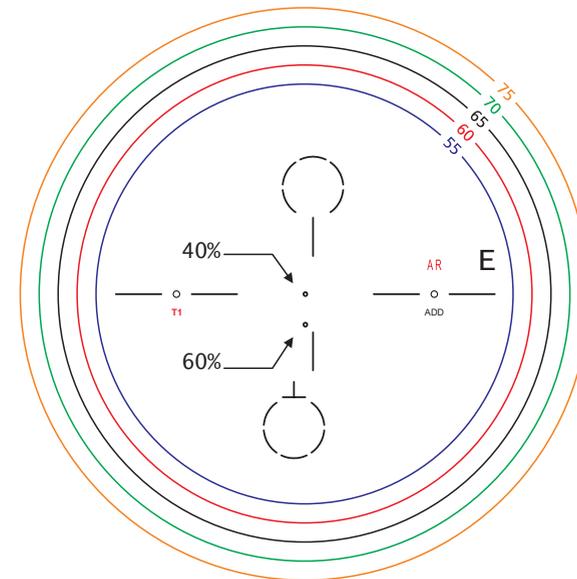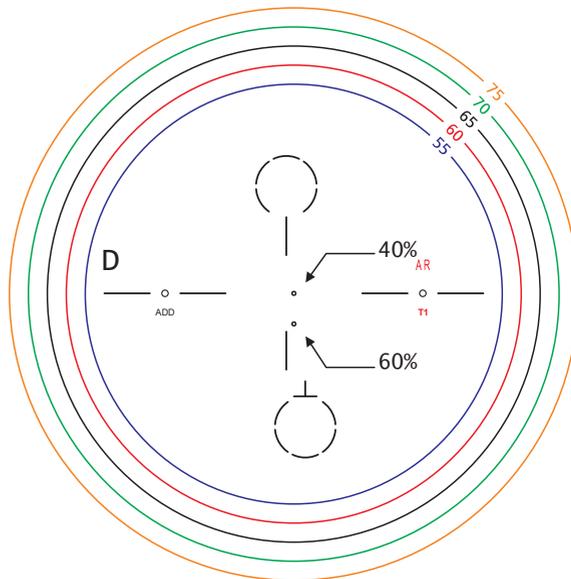

Instruções de Montagem - HOYA DESKTOP e HOYA DESKTOP PREMIUM

As lentes HOYA DeskTop tem uma inovadora possibilidade de adaptação à necessidade do usuário, podendo ser configurada para dois tipos básicos de uso cotidiano.

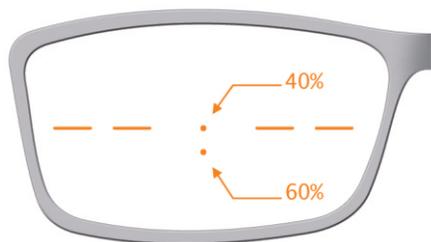

- **VERSÃO 40** - Esta versão é para aquele usuário que utiliza 40% de sua visão cotidiana no escritório para os objetos mais próximos (mesa de trabalho, computador), mas também necessita de uma visão intermediária estendida. A interação entre as visões de perto, intermediária e intermediária estendida é bastante balanceada, para um uso confortável em todo o ambiente de trabalho.

- **VERSÃO 60** - Esta versão é para aquele usuário cuja a área de visão é bem mais focada na zona mais próxima da área de trabalho, onde ele utiliza 60% de seu foco visual. Sendo assim, a área da lente destinada à mesa de trabalho e ao computador é bem mais ampla, e a utilização da área de perto e intermediária são aquelas mais privilegiadas, já que a área de visão para longe é bem menos utilizada por este tipo de usuário.

As versões 40 e 60 são decididas na montagem e são fabricadas a partir do MESMO BLOCO de HOYA DeskTop sem a necessidade de termos duas lentes diferentes para atender a esses dois diferentes tipos de usuários.



Obs.: Devido a convergência necessária para a visão intermediária, a DNP de longe deve ser alinhada no traço vertical que está posicionado acima dos pontos de montagem, deslocado a 1mm dos mesmos.

MIOLIGHT/HIPERLIGHT IDENTITY V+

MIOLIGHT

IDENTITY V+

1.74	Ni7
1.67	Ni5
1.60	Ni3
TRIVEX	NiX
CR-39	Ni1

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

